



Hydrogen H₂+7in1 New generation kozmetikai gép

Használati utasítás

Kedves vásárló, köszönjük, hogy megvásárolta termékünket!
A legjobb képességek és a biztonság érdekében, kérjük, olvassa el ezt a használati útmutatót minden művelet előtt.
Kérjük, hogy a használati útmutatót tartsa meg a későbbi referenciákhoz.

1. Elv.

A hidrogénezett vizet Japánban AquaSure-nak hívják. Ez egy lúgos víz, amely hatékonyan javíthatja a savas pH-jú, zsíros pattanásos bőrt. Képes behatolni a bőrsejtekbe, és hatékonyan eltávolítani a felesleges öregedési tényezőket (szabad gyökök) a szervezetben, eltávolítani a reaktív oxigénfajokat és a káros összetevőket vízzé alakítani, teljesen átalakítani őket teljesen ártalmatlan vízzé, és eltávolítani a káros aktív savakat, egyidejűleg feltölteni a nedvességet.

1.1

(1) Spray :Oxigén O₂ H₂

A modern orvostudomány úgy gondolja, hogy a bomlás a folyamat savasodásának folyamata. Az O₂ elnyelése, az ivás és a dohányzás, a környezetszennyezés stb. oxigén szabad gyököket termelhet az emberi szervezetben. Ez megrongálhatja a sejtstruktúrát, a genetikai betegséget és az öregedést a szervezetben. A hidrogén hatékonyan eltávolíthatja a szabad gyököket a testben. hidrogén antioxidáció sokkal erősebb, mint a C-vitamin, sárgarépa, lecitin stb. emberek már ismert antioxidáns anyag.

(2) Abrasion: Vízvákuum

A kezelés a nem lézeres bőrfelszín-megújító kezelés legújabb vívmánya. hidradermabráziós berendezés, amely egyszerre kombinálja a tisztítást, hámlasztást, hidratálást és antioxidáns védelmet, ami tisztább, szebb bőrt eredményez. A kezelés nyugtató, hidratáló, nem invazív és nem irritáló.

(3) RF fogantyú :

Az RF hatással van a szövetek elektronikájára a biológiai válaszreakcióval együtt.

A bőrt mélyen felmelegíti, hogy ösztönözze az új kollagének kiválasztását, hogy kitöltse a kollagén elvesztésének hiányát, és átrendezze a bőr puha keretének újjáépítését , és végül a bőr feszességét, eltávolítsa a ráncokat, helyreállítja a bőr rugalmasságát és fényét.

(4) Ultrahangos fogantyú :

Az ügyfél által kezelt célnak megfelelően, a megfelelő kivonatokkal és tápanyagokkal,

használja a szondát, hogy bejuttassa őket mélyen a bőrbe, hagyja, hogy teljesen felszívódjanak, így a legjobb szépséghatást érheti el.

(5) Cold Hammer:

Összehúzza a pórusokat, feszesíti a bőrt, eltünteti a ráncokat, elősegíti a kollagén termelést, megszünteti a bőrpírt és az érzékenységet, és halványítja a szem alatti sötét karikákat és táskákat.

(6) Skin Scrubber:

Ez a legnépszerűbb a kozmetikusok között.

Másodpercenként 24000-szeres rezgéstől a másodpercenként ezerszeres mechanikus rezgésig. Bőrmasszázszt és tisztítást is biztosít.

(7) LED maszk:

Különböző színű funkciók:

1. Vörös fény: fehériti és megújítja a bőrt, javítja az érdes pórusokat, és kezeli a mikrovaskuláris tágulatokat;
2. Zöld fény: bőrnyugtató és gyulladáscsökkentő;
3. Kék fény: eltávolítja a pattanásokat, csökkenti a faggyútevékenységet, eltávolítja a pattanásos baktériumokat és javítja a zsíros bőrt;
4. Sárga fény: szeplők eltávolítása, bőrpír, erythema, pigmentcsere javítása

A "RED" 640nm-es vörös hullámhosszúságú 640nm 1~6 mm-re hatol be a bőrbe a bőrsejtek regenerálódása, a vérkeringés elősegítése, az aknés hegek, az allergiás dermatitisz enyhítése, a fájdalom enyhítése és a hatóanyagok aktiválása jó hatással van.

A "BLUE" 423 nm-es kék hullámhosszúságú, 1 mm-re hatol be a bőrbe, hogy elpusztítsa az akne baktériumokat, gátolja a faggyúmirigyek működését, megelőzze a sebfertőzéseket és megnyugtassa az allergiás bőrt.

A "ZÖLD" zöld hullámhosszú 532nm 0,5~2 mm-re hatol be a bőrbe, jó nyugtató hatással van az érzékeny bőrre, valamint az elmére és a testre.

"SÁRGA" sárga - az 583 nm-es hullámhossz 1~2 mm-rel hatol be a bőrbe, hatékonyan kezeli a bőrpírt/eritémiát, enyhíti a bőrpírt, a pigmentvörösséget és egyéb hatásokat.

2.

(1) Hidrogén-oxigén(H₂O₂) szórópisztoly:

Az esszenciával kombinálva a készülék oxi-hidrogént termel, amely gyorsan behatolhat a bőrbe.

(2) **Vákuumos tisztítás** Hydra Water arctisztító Aqua Peel

Zsugorítja a pórusokat, javítja a sötét bőrt, eltávolítja a mitesszereket.
Mélytisztító stb.

(3) RF Radiofrekvencia

Javítja a finom ráncokat, fokozza a bőr feszségét és ragyogóvá teszi.

(4) Ultrahang

Az 1 millió-3 millió rezgés révén az esszencia mélyen behatol a bőrbe, gyengéden masszírozza a sejteket, elősegíti az anyagcserét, növeli a sejtek életképességét, és javítja a vér- és nyirokkeringést.

(5) Hideg kalapács

Összehúzza a pórusokat, feszesíti a bőrt, eltünteti a ráncokat, elősegíti a kollagén termelést, megszünteti a bőrpírt és érzékenységet, halványítja a szem alatti sötét karikákat és táskákat.

(6) Hidroabrázió, Bőrradír vibrációs tisztítás

elhalt bőr, mitesszerek eltávolítása,

Vákuumos tisztító Radiofrekvencia Oxigen spray

Ultrahang Hideg arcvasaló

Hidroabrázió



2 Rövid bevezetés:

2.1 A képen látható fogantyú neve és a gépen feltüntetett név szerint szerelje be:



3 Major Adjustment Buttons



ABC Cleaning Bottle



Waste Bottle / H2O2 Bottle



LED Touch Screen



Output Interface



Six Major Probes



Megjegyzés:

A palack: tisztított víz

B palack: Hidratáló bőrápoló termékek

C palack: tisztító hatású bőrápoló termékek

Ügyeljen arra, hogy hígítsa, vagy tegye a szükséges folyadékot, az A, B és C folyadékok közvetlenül tisztítják a pórusokat a tisztítónyélen keresztül, és hidratálják a bőrt.

Ha nincs bőrápoló vagy tisztítószered, akkor tiszta vízzel tisztítsd meg az arcodat. Győződjön meg róla, hogy a koncentrációja folyadék nagyon alacsony, különben elzárja a fogantyút. A kezelés után hagyja a fogantyút tovább dolgozni (tiszta vizet használjon), így átmosódik a cső.

2,2 Vigyázat

a) Figyelmet igénylő kérdések

*A használatra vonatkozó

óvintézkedések helye

figyelmeztetés:

- Kérjük, a tűz elkerülése érdekében ne használjon elosztókat;
- A tűz és az áramütés elkerülése érdekében a biztosíték cseréjekor feltétlenül kapcsolja ki a hálózati kapcsolót;
- A sérült vagy elhasználódott tápkábelek használata tüzet és áramütést okozhat;
- A tűz és az áramütéses balesetek elkerülése érdekében ne hajlítsa vagy csavarja túlságosan a tápkábelt;
- Ha a készülék meglazul, leesik vagy megsérül, kérjük, időben lépjen kapcsolatba a céggel;
- Ne használja a készüléket instabil környezetben, például dőlés, rezgés vagy ütés esetén;
- A készülék belsejébe nem kerülhet víz vagy törmelék. Ha idegen tárgyak kerülnek be, kérjük, időben lépjen kapcsolatba cégünkkel;
- A készülék mozgatásakor a hálózati csatlakozót ki kell húzni;
- A műszer mozgatásakor a lehető legnagyobb mértékben kerülje a rezgést;
- A műszert stabil helyre kell helyezni, és legalább 5 cm helyet kell hagyni körülötte a levegő keringésének biztosítása és a műszer hőelvezetésének megkönnyítése érdekében;
- Semmit sem szabad letakarni a műszeren, hogy megakadályozza a szellőzőnyílások elzáródását;
- Kerülje a készülék használatát a következő környezetekben: napfénynek kitett helyeken; magas páratartalmú környezetben; víz közeli környezetben; rezgésnek és dőlésnek kitett helyeken; erős mágneses mezővel rendelkező környezetben; olyan helyeken, ahol elektromágneses hullámok és impulzusfeszültség fordul elő; olyan helyeken, ahol vegyi anyagokat tárolnak korrozív gázos helyeken;

Ezt a készüléket nem szabad rádiók, televíziók, fénymásolók, faxgépek stb. közelében elhelyezni és használni;

Ne használja más műszerekkel (pl. mikrohullámú), hogy elkerülje a műszerek közötti kölcsönös interferenciát és a hibás működést.

• Használat előtti óvintézkedések

figyelmeztetés:

- 1) Ügyeljen arra, hogy indítás előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A kezelőnek ismernie kell az utasításokat és a kezelési módokat, és a készüléket egy erre kijelölt személynek kell kezelnie;
- 2) Kérjük, hogy a működési paramétereket szakemberek irányításával állítsa be;

jegyzet:

- 3) Használat előtt győződjön meg arról, hogy a készülék normál üzemmódban van-e;
- 4) Annak megerősítése, hogy a földkábel megfelelően van-e csatlakoztatva;
- 5) Annak megerősítése, hogy minden vezeték megfelelően csatlakoztatva és biztonságosan van-e;
- 6) Amikor a műszereket együtt használják, helyesen kell használni őket, különben veszélyt jelenthetnek, ezért nagyon óvatosnak kell lennie.

• Óvintézkedések a használat során:

- 1) Ha a műszer működése során rendellenes helyzet áll elő, a kezelő azonnal leveszi a kezelőfogantyút a vendégről, és a műszer használatának leállítása érdekében megnyomja a leállító kapcsolót;

jegyzet:

- 2) A műszer működése során folyamatosan figyelni kell a vendég és a műszer állapotát, és figyelni kell arra, hogy bármikor van-e bármilyen rendellenesség;
- 3) A műszert szakképzett kezelőnek kell helyesen használnia, és a kezelőn kívül más személy nem használhatja a műszert.

• Óvintézkedések a használat után:

- A művelet befejezése után helyezze vissza a kezelőfogantyút a kezelőfogantyú-akasztóba.
- A szondát a kezelőfogantyú használata után a következő használathoz meg kell tisztítani.

• Óvintézkedések a meghibásodásra, tárolásra és ellenőrzésre vonatkozó figyelmeztetés:

- Ne használja a készüléket, ha rendellenes körülmények lépnek fel. Abban a valószínűtlen esetben, ha füst- és égésszagot érez, és nem lehet működtetni, ha továbbra is

használata esetén fennáll a tűz és az áramütés veszélye. Kérjük, gyorsan nyomja meg a leállító gombot, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót, és azonnal lépjen kapcsolatba cégünkkel vagy kereskedőnkkel;

- más személyek nem javíthatják vagy módosíthatják a készüléket. Soha ne nyissa ki a készülék belsejét;

jegyzet:

- A műszereket és alkatrészeket rendszeresen ellenőrizni kell;
- Ne használjon olyan tisztítóeszközöket, amelyek károsítják a készülék védőbevonatát, például keféket, seprűket stb;
- Ha a készüléket több mint 2 hétig nem használják, a készüléket az újbóli használat előtt gondosan ellenőrizni kell.

- **Figyelmeztetés és szuggesztív**

utasítások figyelmeztetés:

Ha a nagyfrekvenciás berendezés és a műszer egyidejűleg ugyanahhoz a beteghez van csatlakoztatva, a műszer elektródapozíciója égési sérüléseket okozhat a beteg bőrszövetén, és károsíthatja a műszert is. Ha ezt a műszert rövidhullámú vagy mikrohullámú berendezés közelében (1 m) használja, a műszer kimenete instabil lehet a mikrohullámú interferencia miatt.


A mellkashoz közeli elektródák használata növeli a szívfibrilláció kockázatát.

b) **Ellenjavallatok**

1. Érzékeny bőrűek és súlyos pattanásosak
2. Szívritmus-szabályozó készülék, beültethető szívdefibrillátor vagy más elektromágneses beültethető orvostechikai eszköz
3. Súlyos cukorbetegségben, magas vérnyomásban és hiperlipidémiában szenvedő betegek
4. Bőrfertőzésben szenvedők

3. fejezet telepítése

a) Bevezetés a műszerbe

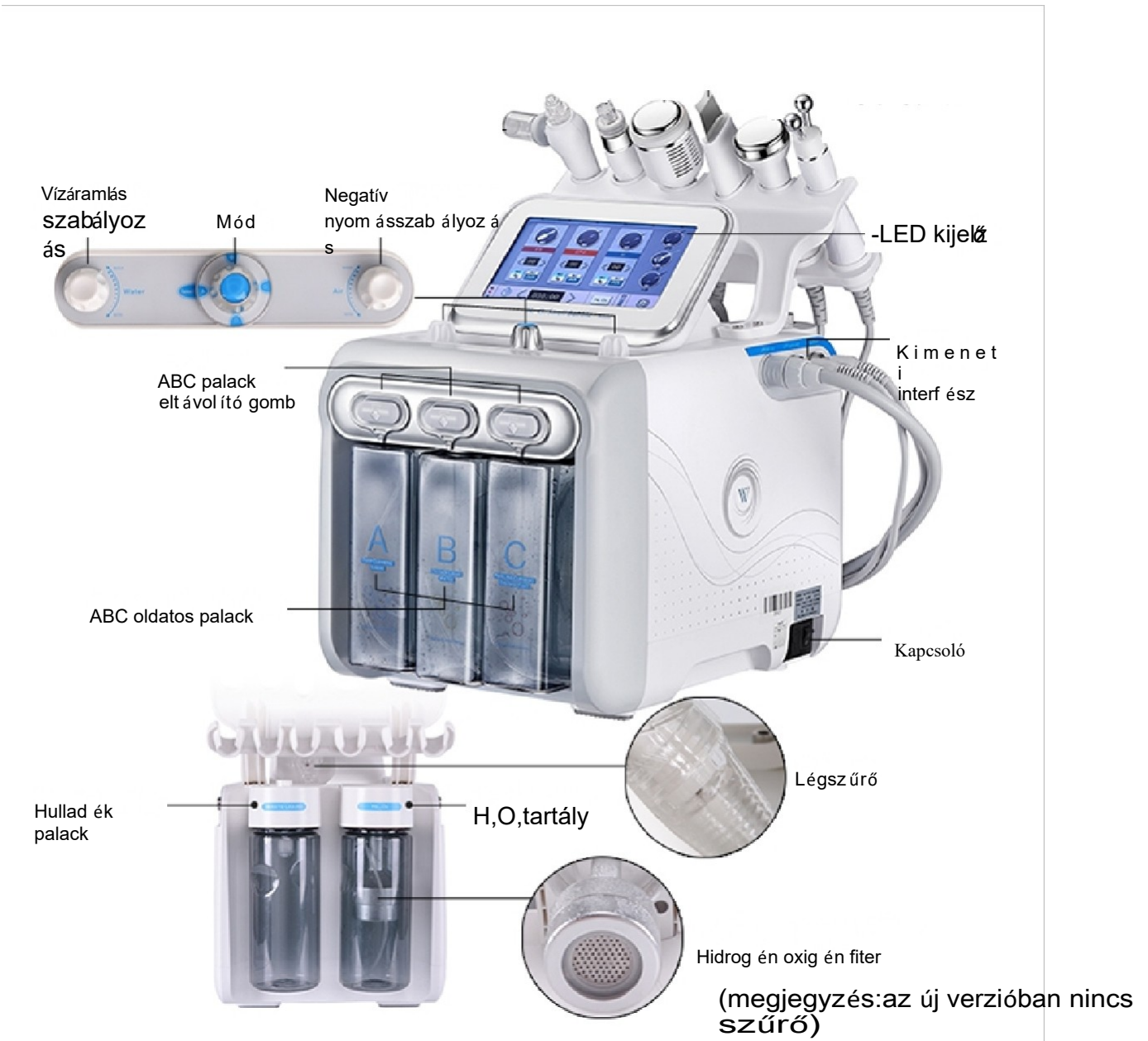

b) Műszer telepítési utasítások

(1) Kicsomagolás és ellenőrzés

① Óvatosan vegye ki a készüléket és a tartozékokat a készüléktartóából. a csomagolódobozba, és a csomagolóanyagokat tegye el a későbbi szállításhoz vagy tároláshoz. Ellenőrizze a tartozékokat a csomagolási lista szerint.

② Ellenőrizze, hogy van-e mechanikai sérülés. megjegyzés:

Ha bármilyen kérdése van, azonnal vegye fel a kapcsolatot cégünkkel.

(2) A készüléket tiszta, szellőztetett helyiségben kell elhelyezni, ahol a hőmérséklet 5 °C és 40 °C között van, a páratartalom nem haladja meg a 80%-ot, és kerülje a közvetlen napfényt. És győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílás nem záródik el, és gondoskodjon arról, hogy a készülék körül legalább 5 cm-es rés maradjon. Ne feledje, hogy ne helyezzen tárgyakat a műszerre, még akkor sem, ha az ideiglenes, ez nem megengedett.

(3) A készülék mindkét oldalán lévő kimeneti interfészek felett található szöveges és képi információk utasításoknak megfelelően helyezze be a tartozékokat a megfelelő interfészekbe. Ezután helyezze el a tartozékokat rendezetten a tartozéktartó állványon.




C) A műszer hátsó és oldalsó alkatrészeinek leírása

D) A műszer mozgásakor távolítsa el az A, B, C, D palackon lévő összes folyadékot, különben a folyadék a mozgás során bejut a műszer belsejébe, ami károsíthatja a műszert.

E) A készülék használatakor, ha a készülék "beep beep" hangot ad ki, kérjük, hogy

a felületet figyelve a pazarolt palackra. Ha villog, kérjük, öntse ki a pazarló vizet, és a kiöntés után szerelje be a pazarló palackot a készülékbe.

4.1 Az Aqua arckezeléshez való használat

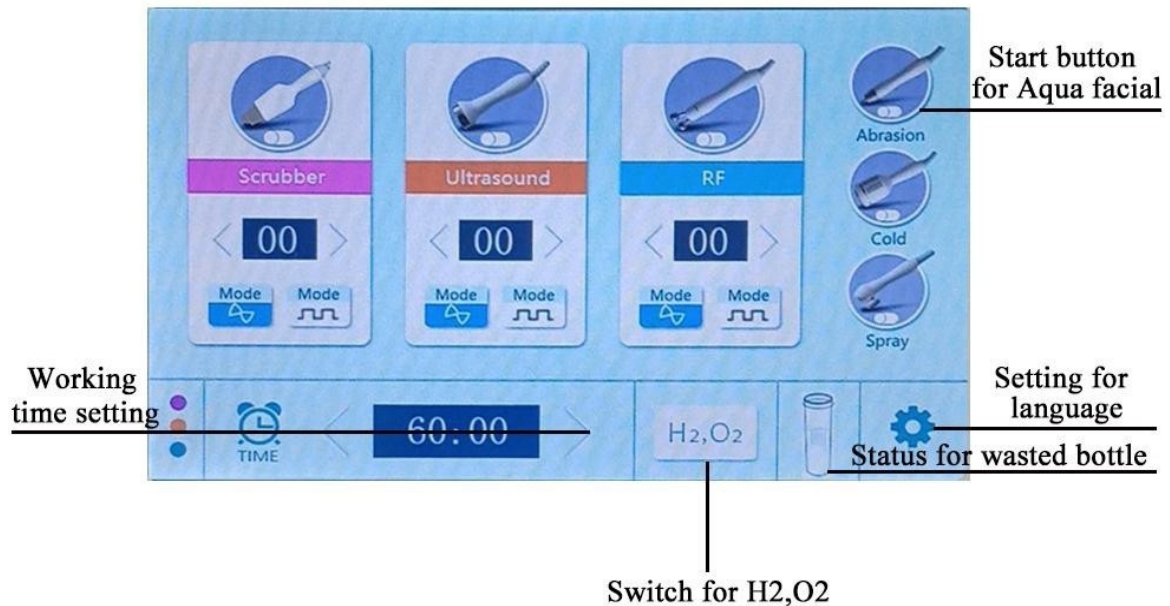

4.1.1 Az arc tisztítása arctisztítóval.

Folyékony bőrápoló termék a tiszta arcra, adjuk hozzá A/B/C. Ha nincs, használjon tiszta vizet vagy desztillált vizet. És javasoljuk, hogy tisztítsa meg az arcot a kezelés előtt, hogy az arc kozmetikai maradványok nélkül legyen.

4.1.2 Az aqua arctisztító fej kiválasztása a bőr helyzetének megfelelően. A folyadék kiválasztása (A,B,C) a gomb elforgatásával vagy a H₂, O₂.

Forgassa el a gombot a vizes palack kiválasztásához: Ha a Spray fogantyút használja, válassza ki a D-t, ha H₂, O₂-t szeretne, akkor is kattintson a " " gombra.


képernyő.

4.1.3 Az áramlási szint és a nyomáskar beállításával a munka megkezdéséhez az egész tisztítási eljárás körülbelül 10 perc alatt elvégezhető.

Vigyázat!

Amikor a H₂O₂-t használja a D palackból, amely a gép hátulján található, először válassza a gombot a D állásba, és nyomja meg a gombot (H₂O₂), majd várjon körülbelül 3 percig, hogy megbizonyosodjon arról, hogy elegendő (H₂O₂) van a palackban.

4.1.4 Ha végezt a műszer használatával, állítsa a gombot a C állásba az aqua arcápoló cső tisztításához. Először válassza ki az áramlási szintet a maximális intenzitásra, majd válassza ki a nyomásszintet a maximálisra. Ezután kapcsolja be a készüléket, és helyezze fel az aqua facial fejet az aqua facial szondára. Ezután a gép belsejében lévő csövek automatikusan megtisztulnak.

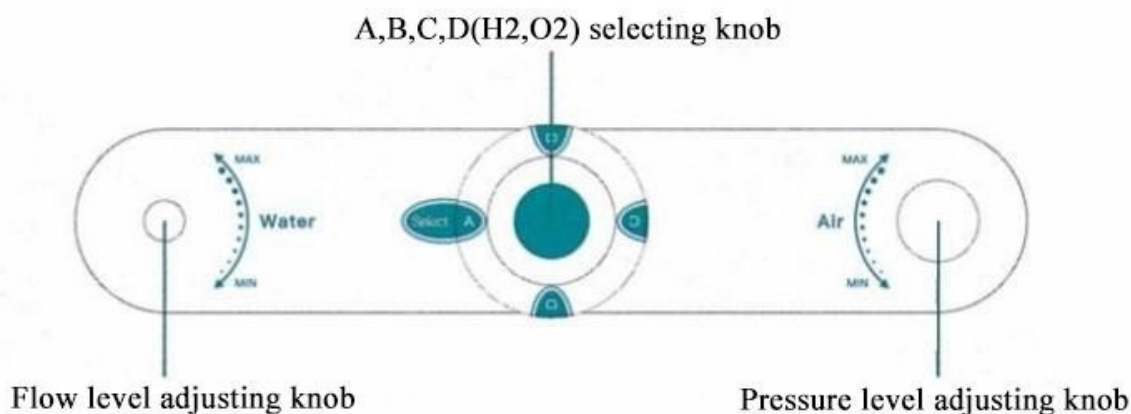

Vigyázat!

Ha a palackokban lévő folyadékokat már felhasználták, kérjük, adjon meleg vizet az A, B, C, D palackba, és tisztítsa meg a csöveket a 4.1.4. pontban leírt módszerekkel, hogy elkerülje a csövek eltömődését.

4.2 Spray fogantyú használatához



4.2.1 A kezelési terület megtisztítása a fogantyú használata előtt.

4.2.2 Öntse a hígított bőrápoló terméket (hidratáló vagy fiatalító hatású esszenciát) az airbrush tartályába.

4.2.3 Nyomja meg a képernyőn megjelenő szórópisztoly indítógombját.

4.2.4 Nyomja meg a gombot a szórópisztolyon, majd a pisztoly működésbe lép és a kezelendő területre céloz.

4.3 Hideg kalapács használatához



4.3.1 A kezelési terület megtisztítása a hidegkalapács használata előtt.

4.3.2 Nyomja meg a képernyőn a start gombot.

4.3.3 A hideg kalapács használata a kezelt területen.

Az arc kezelése:

Kezdjük az ophryonból és terjedjünk el, haladjunk felfelé. Ahogy a képen látható.


(1)Az alsó állkapcsától a füléig.

(2)Az alsó állkapocsból az orrba.


(3)Az orrtól a templomig.

(4)A belső saroktól a halántékig,


ne kerüljön túl közel a szemhez, és legyen gyengéd.

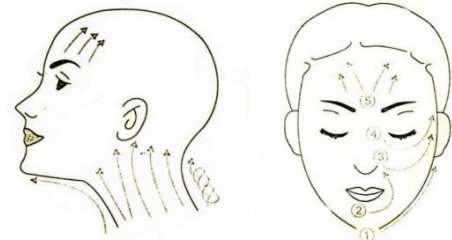

Javasoljuk:Működési mód

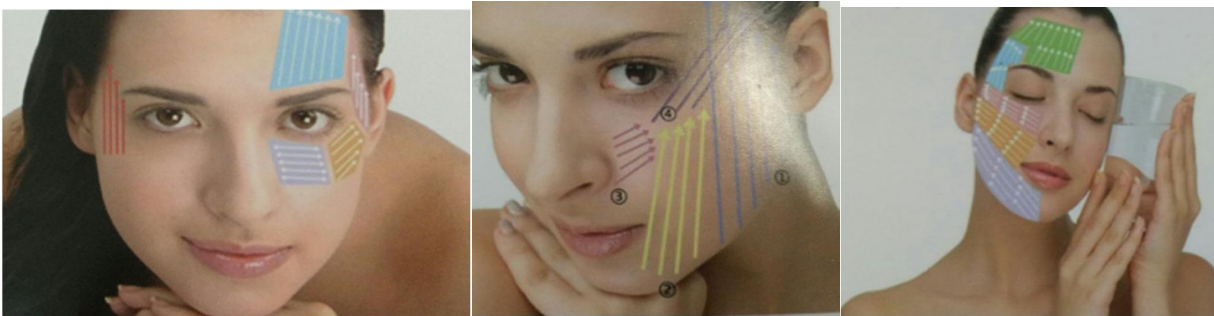

4.4 RF használatához

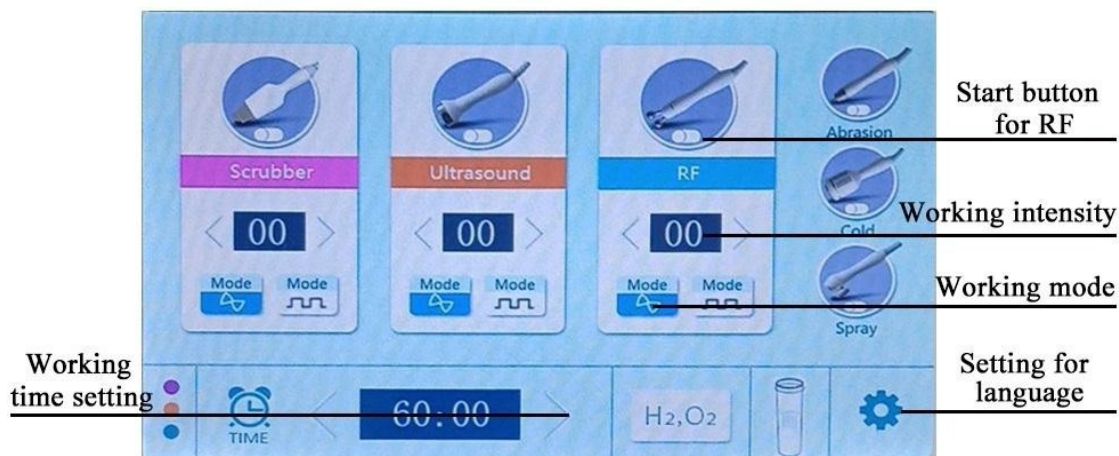

4.4.1 A kezelési terület megtisztítása a készülék használata előtt.


4.4.2 Vigyen fel megfelelő gélt a kezelt területre.

4.4.3 A munkaidő, az RF intenzitás és az RF üzemmód beállítása használat előtt.

4.4.4 Az RF fogantyú használatával maradjon közel a kezelési területhez, és nyomja meg a képernyőn a start gombot az RF funkció elindításához.

4.4.5 Az arcvonalak és a nyak szerint alulról felfelé haladva körözzön a méregtelenítés megvalósítása érdekében. És a műveleti idő körülbelül 10-15 perc.

4.5 Ultrahangos használat

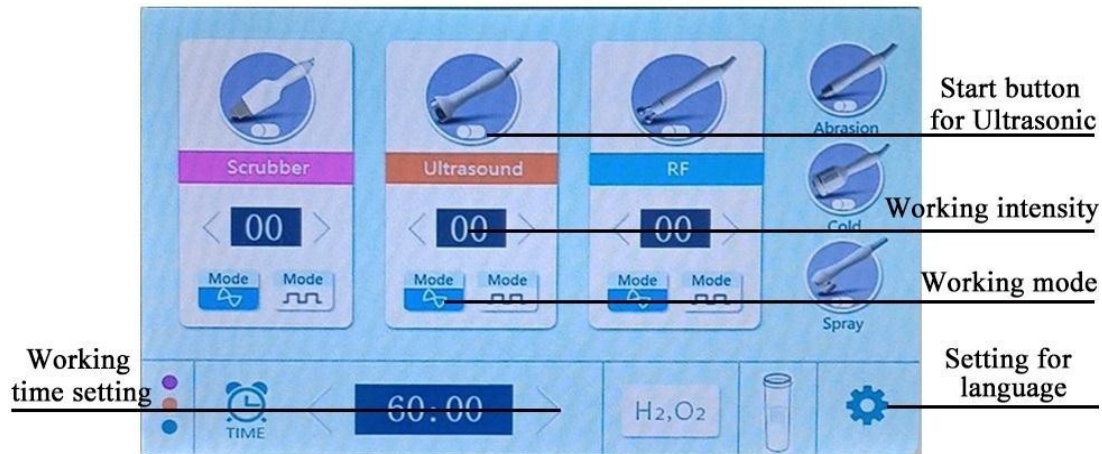

4.5.1 A kezelési terület megtisztítása a kezelés előtt.


4.5.2 Vigyen fel megfelelő gélt a kezelt területre.

4.5.3 A munkaidő, az ultrahangos intenzitás és az ultrahangos üzemmód beállítása használat előtt.

4.5.4 Az ultrahangos fogantyú használatával maradjon közel a kezelési területhez, és nyomja meg a képernyőn lévő start gombot az ultrahangos funkció elindításához.

4.5.5 A kontúrvonal szerint, és a kezelt területet 5-8 perc alatt körözve kezelje.

4.6 A bőrradírt használatához

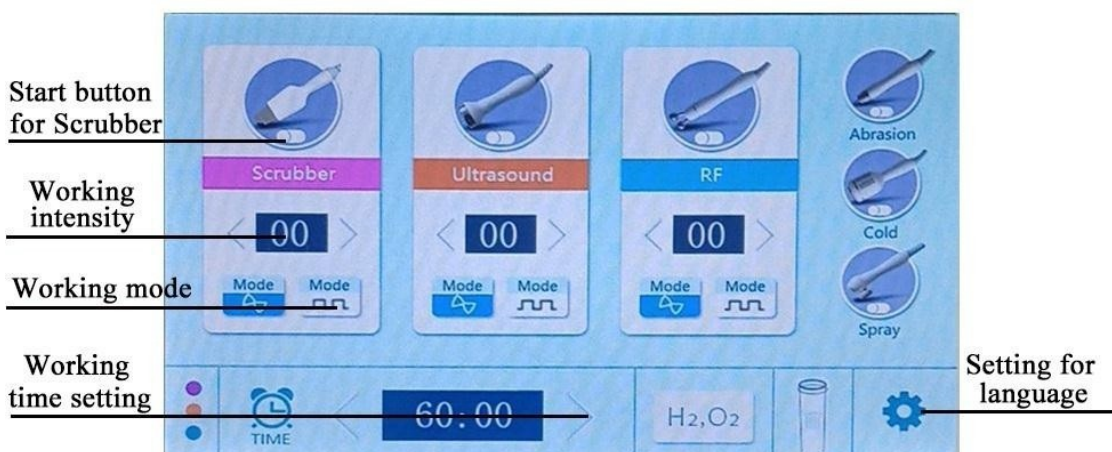

4.6.1 A kezelési terület megtisztítása a kezelés előtt.

4.6.2 A munkaidő, az intenzitás és az üzemmód beállítása használat előtt.

4.6.3 A tisztítási módszerrel távolítsa el a szennyeződéseket a bőrfelületről.

① Az arctisztító használata a bőr tisztítására.

② Használat előtt sterilizálja a bőrradírt.

③ Elegendő víz felvitele a bőrre.

④ A penge 45 fokban van megdőntve, győződjön meg róla, hogy közel van a bőrhöz, és mérsékelt sebességgel mozog fel és le.

⑤ A teljes munkaidő 20 perc.

4.6.4 A nyirokmasszázs az érintés módszerével.


① Az arctisztító használata a bőr tisztítására.

② Használat előtt sterilizálja a bőrradírt.


③ Elegendő bőrápoló termék alkalmazása a bőrön.

④ A bőrradírozó fejét a bőrrel simítsa össze, és az izmok textúrájának megfelelően mozgassa.

⑤ A teljes munkaidő 15 perc.

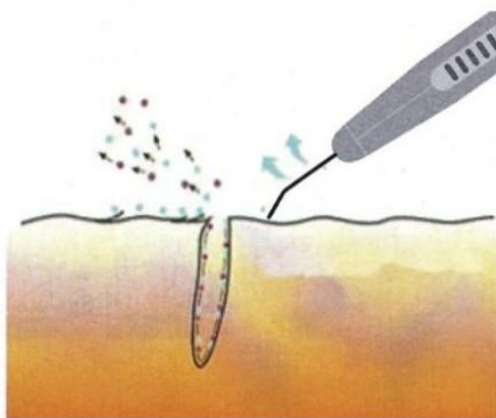

Cleaning method

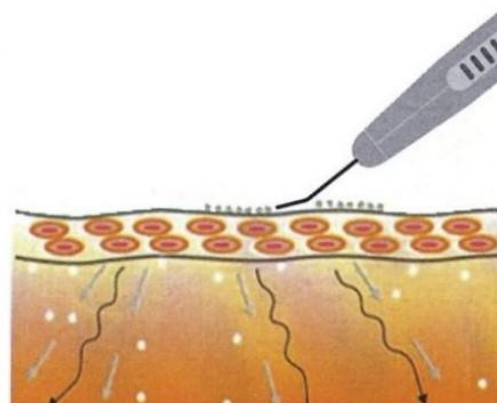

Touching method

4.7 LED maszk



- ① válassza ki a LED-es gombot, akkor működni fog;
- ② mód kiválasztása :vaku vagy színes
- ③ válasszon színt: RL (vörös fény), GL (zöld fény), BL (kék fény);

4.7 Megjegyzések

jegyzet:

- A kezelést követő 24 órán belül ne használjon irritáló bőrápoló és kozmetikai szereket, és ügyeljen a fényvédelemre.
- Alkalmazzon tiszta hidratáló maszkot 1 hétig
- Vékony szaruréteg vagy súlyos vörös vércsíkok az arccsontokon, ne használja.
- Súlyos allergia, súlyos pattanások ,ne használja.

figyelmeztetés:

Ha a beteg rosszul érzi magát, a beteg biztonsága érdekében a kézi vezérlő megnyomásával leállíthatja a készülék kimenetét.

4.8 Karbantartási szolgáltatás

- 5.1 A műszerre 2 év garancia vonatkozik, kivéve a tartozékokat és a fogyóeszközöket. A garancia lejártá után karbantartási szolgáltatást nyújtunk,de fizetős.

5.2 Ha a fogyóeszközöket és tartozékokat szeretné pótolni vagy megvásárolni, kérjük, forduljon a forgalmazóhoz tanácsért.

5.3 Az emberi okból bekövetkező meghibásodás az alábbiak szerint nem tartozik a garanciánk körébe.

- ① A készüléknek az ügyfél által történő szétszerelése vagy átalakítása által okozott meghibásodás.
- ② Helytelen vagy ésszerűtlen karbantartás okozta meghibásodás.
- ③ A készülék ütés vagy leejtés által okozott meghibásodás.
- ④ A hibás működés okozta meghibásodás.
- ⑤ Ellenállhatatlan katasztrófa, például földrengés, tűzkatasztrófa által okozott kár.

5.4 Üdvözljük minden megjegyzés és javaslat esetén.

5.5 A gépek tisztításakor használjon száraz, puha törülközőt a gép porának eltávolításához, és nedves, puha törülközővel törölje át a gépet a szennyeződések eltávolításához.